

**Step 1**      **Inserting the Feeding Set**

A. For a 500-mL feeding bag:  
Place the bag in the first large section of the backpack. (Fig. 1)  
Thread the end of the tubing through the middle set of Velcro straps, and through the hole on the bottom, toward the back of the backpack. The end of the tubing should exit the back of the backpack. (Fig. 1)

B. For a 1,200-mL bag:  
Place the bag in the largest section, to the rear of the backpack. (Fig. 3) Thread the end of the tubing through the Velcro straps on the bottom, and out the back of the backpack. (Fig. 2) Thread the cassette through the hole toward you until it sits in the pump section.

**Step 2**      **Securing the Feeding Bag**

Squeeze any air out of the feeding bag and pour desired amount of formula into the bag. Close it tightly.  
Secure the neck of the feeding bag with the Velcro strap inside the backpack. Secure the handle of the bag with the inner metal clip. (Fig. 3)

**Step 3**      **Inserting the Pump**

Load the cassette into the pump and close the door. Prime the tubing per pump instructions and set the pump to the desired setting. Secure the pump in the front section of the backpack with the Velcro straps. Be sure that the pump fits snugly. Close all sections of the backpack, using the zippers.

**Step 4**      **Making the Backpack Comfortable and Secure**

Adjust the shoulder straps according to comfort. Use the abdomen strap to secure the backpack around the waist.



Fig. 1

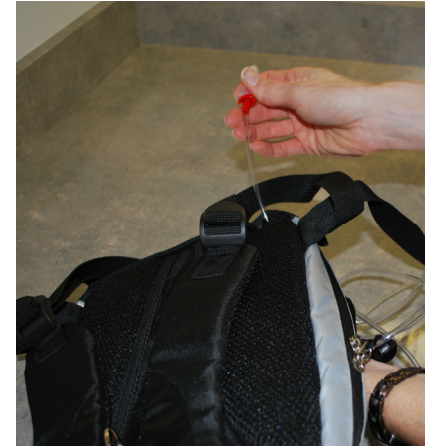


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

**Mochila de alimentos de  
Shield HealthCare  
Instrucciones para usar**

**Paso 1 Instalacion del equipo de alimentación**

**A. Bolsa de alimentación de 500-ml:**

Coloque la bolsa en la primera sección grande de la mochila. (Fig. 1) Pase la punta del tubo por las tiras de velcro por la parte de en medio, y por la perforación por la parte de abajo hacia el lado posterior de la mochila. La punta del tubo debe salir por la parte de atrás de la mochila. (Fig. 1)

**B. Bolsa de 1,200 ml:**

Coloque la bolsa en la sección más grande en la parte de atrás de la mochila. (Fig. 3) Pase la punta del tubo adentro de la tiras de velcro hacia el fondo y hágala salir por la parte de atrás de la mochila. (Fig. 2) Pase el cassette por la perforación jalándolo hacia usted hasta que se asiente en la sección de la bomba.

**Paso 2 Asegure la bolsa de alimentación**

Saque todo el aire de la bolsa de alimentación y coloque adentro la cantidad deseada de la fórmula. Cierre a bolsa fuertemente. Asegure el cuello de la bolsa con la tira de velcro dentro de la mochila. Asegure cu ello de la bolsa con el broche metálico interno (Fig. 3) De ser necesario, puede colocar una bolsa de hielo junto a la bolsa de alimento adentro de la mochila.

**Paso 3 Inserte la bomba de alimentación**

Cargue el cassette adentro de la bomba y cierre la tapa. Purgue los tubos de acuerdo con las instrucciones de la bomba y ajuste la bomba según usted requiera. Asegure la bomba en la parte de enfrente de la mochila con las tiras de velcro. Cierre todos las partes de la mochila usando los zíperes. Asegurese que la bomba quede bien asegurada.

**Paso 4 Asegure y haga cómoda la mochila**

Ajuste las tiras del hombro para que le queden cómodas. Use la tira abdominales para asegurar la mochila alrededor de la cintura.



Fig. 1

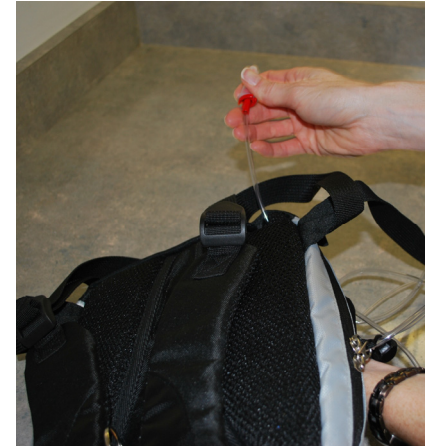


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4